

Personenwaage

SANOTEC® MD 14770



Bedienungsanleitung

Inhalt

1.	Verwendete Warnsymbole und Signalwörter	4
3.	Lieferumfang.....	4
4.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
5.	Sicherheitshinweise.....	6
	5.1. Eingeschränkter Personenkreis	6
	5.2. Allgemeines	6
	5.3. Richtig mit Batterien umgehen	7
	5.4. Niemals selbst reparieren	8
6.	Batterien einlegen	8
7.	Geräteübersicht	9
8.	Das Display.....	9
9.	Das Gewicht messen.....	10
10.	Voreinstellungen	10
	10.1. Gewichtseinheit wählen.....	10
	10.2. Sprachausgabe ein-/ausschalten.....	10
11.	Fehleranzeigen	10
12.	Das Gerät reinigen	11
13.	Entsorgung.....	11
14.	Technische Daten.....	12
15.	Impressum.....	12

1. Verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
.	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
▶	Auszuführende Handlungsanweisung

3. Lieferumfang

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert worden sind:

- Digitale Personenwaage
- 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA / LR03 / R03
- Bedienungsanleitung, Garantiekarte

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihre digitale Personenwaage mit Sprachausgabe führt eine Gewichtsmessung Ihres Körpers durch.

Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Benutzen Sie das Gerät also nicht für eine medizinische Diagnostik. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu verwenden und kann keine ärztlichen Maßnahmen ersetzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

5. Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

5.1. Eingeschränkter Personenkreis

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

5.2. Allgemeines



Stellen Sie die Waage nur auf feste, ebene Böden.



Schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit.



Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen oder nassem Körper.



Stellen Sie sich immer mittig auf die Wiegefläche.



Betreten Sie die Waage nur barfuß.



Gehen Sie sorgfältig mit der Waage um. Belasten Sie die Waage nicht, wenn Sie keine Gewichtsmessung vornehmen, und stellen Sie keine Gegenstände auf ihr ab.

- Benutzen Sie das Gerät bei Beschädigungen auf keinen Fall weiter, da Verletzungsgefahr besteht.
- Bewahren Sie die Waage nicht senkrecht auf.

5.3. Richtig mit Batterien umgehen

Das Gerät wird mit zwei 1,5 V Batterien Typ AAA /LR03 /R03 betrieben.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus).
- Versuchen Sie nicht, normale Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Stellen Sie das Gerät daher nicht auf Hitzequellen (z. B. Heizkörper) oder unter direktes Sonnenlicht.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Wenn Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Nehmen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Ätzgefahr durch Batteriesäure!

5.4. Niemals selbst reparieren

- Bitte wenden Sie sich an das Medion Service Center, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.
- **WARNUNG!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren. Eine Änderung des Geräts ist ohne Erlaubnis des Herstellers untersagt.
- Wenden Sie sich im Fall einer Störung an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

6. Batterien einlegen

Die Waage wird mit zwei 1,5 V Batterien Typ AAA / LR03 / R03 ausgeliefert.

- ▶ Um die Batterie einzulegen oder auszuwechseln, öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Geräts.




ACHTUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

- ▶ Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (die richtige Polarität ist im Batteriefach dargestellt).
- ▶ Wenn die Batterien eingelegt sind und das Batteriefach geschlossen ist, stellen Sie die Waage auf den Boden und geben Sie etwas Gewicht auf die Waage. Warten Sie, bis die Waage abschaltet. Sie ist jetzt kalibriert.
- ▶ Wenn im Display **Lo** erscheint, oder die Intensität des Displays nachlässt, muss die Batterie ersetzt werden.
- ▶ Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein.
- ▶ Setzen Sie das Gerät mit den eingelegten Batterien nicht direkter Wärme oder direktem Sonnenlicht aus. Stellen Sie das Gerät z. B. nicht auf einer Heizung ab.
- ▶ Wenn Sie die Waage für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Beachten Sie zum richtigen Umgang mit den Batterien auch die „5. Sicherheitshinweise“ auf Seite 6.


7. Geräteübersicht

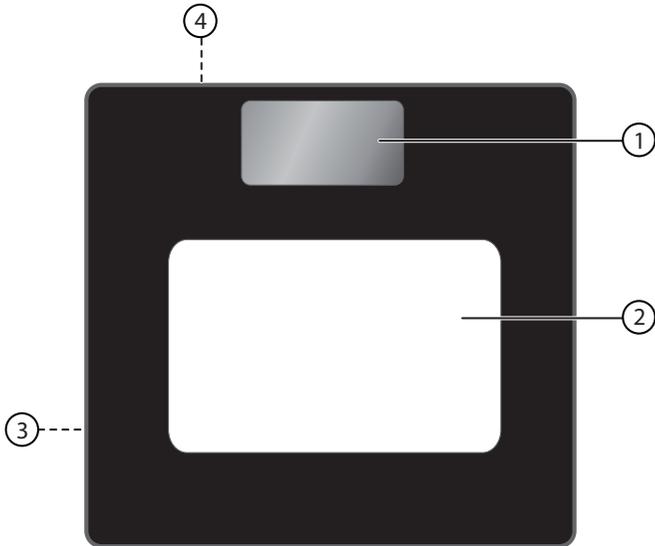

- 1) Display
- 2) Standfläche
- 3) Batteriefach (auf der Unterseite)
- 4) **UNIT:** Gewichtseinheit wählen (auf der Unterseite), Sprachausgabe ein-/aus-schalten

8. Das Display

Die folgende Darstellung zeigt alle verfügbaren Anzeigen im Display:

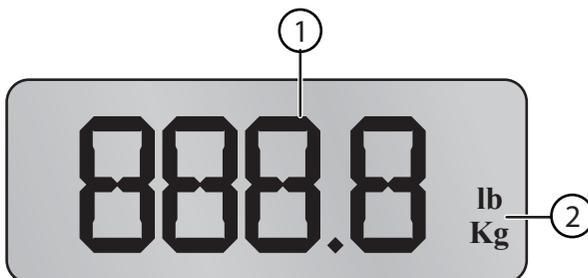

- 1) Stellen für die Gewichtsanzeige, Fehlermeldungen
- 2) Gewicht in kg oder Pfund

9. Das Gewicht messen

- ▶ Stellen Sie vor der Messung die gewünschte Gewichtseinheit ein, siehe „10.1. Gewichtseinheit wählen“ auf Seite 10
- ▶ Stellen Sie sich auf die Waage.

Die Waage schaltet sich nun automatisch ein und misst ihr Gewicht.

Die Displayanzeige blinkt dreimal und das Gewicht wird Ihnen in der voreingestellten Gewichtseinheit angezeigt (siehe „10.1. Gewichtseinheit wählen“ auf Seite 10) und zweimal angesagt (z. B. „Ihr Gewicht beträgt 62,2 kg“).

- ▶ Die Waage schaltet sich automatisch wieder ab.
- ▶ Wenn die Waage für ca. 10 Sekunden kein Gewicht misst, stellt sie sich automatisch aus.
- ▶ Falls die Waage die Meldung **Err** zeigt, nehmen Sie das Gewicht von der Waage und führen die Messung erneut durch.

10. Voreinstellungen

10.1. Gewichtseinheit wählen

Die Waage ist eingeschaltet. Sie können die Waage durch Stellen auf die Waage oder durch längeres Drücken der Taste **UNIT** auf der Unterseite der Waage einschalten.

- ▶ Drücken Sie die Taste **UNIT** auf der Unterseite der Waage, um die gewünschte Gewichtseinheit kg oder lb zu wählen.

Im Display wird die gewählte Einheit angezeigt.

10.2. Sprachausgabe ein-/ausschalten

Die Waage ist eingeschaltet.

- ▶ Halten Sie auf der Geräteunterseite die Taste **UNIT** solange gedrückt, bis das Display **on** (Sprachausgabe ist eingeschaltet) bzw. **off** (Sprachausgabe ist ausgeschaltet) anzeigt.

11. Fehleranzeigen

Display	Fehlermeldung
Err	Überbelastung Nehmen Sie sofort Gewicht von der Waage, da sonst dauerhafte Schäden auftreten können.
Lo	Batteriestand zu niedrig. Erneuern Sie die Batterien.

12. Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zur Reinigung nur milde Seifenlösungen. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Wischen Sie die Waage anschließend gründlich trocken ab. Es besteht Rutschgefahr!

13. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



Gerät

Werfen Sie Ihr Gerät am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

14. Technische Daten

Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA / LR03 / R03
Min. Gewicht	3 kg / 6.61 lbs
Max. Gewicht	180 kg / 396 lbs
Toleranz	3-20 kg: +/- (1%+100g) 21-180 kg: +/- 1%
Gewichtseinteilung	0.1 kg / 0.2 lbs
Betriebstemperatur	10 ~ 35°C



Technische Änderungen vorbehalten!

15. Impressum

Copyright © 2013

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



MEDION®

DE

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medionservice.de

www.medion.de